


ÁLLATORVOSI RÖNTGEN RENDSZEREK

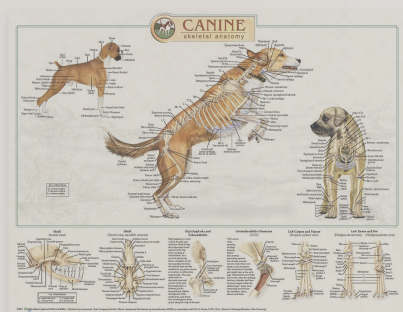

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ ÁLLATORVOSI RÖNTGENDIAGNOSZTIKAI MEGOLDÁSOK HOSSZÚTÁVRA

**A ZooMax család diagnosztikai berendezései valamennyi
állatgyógyászati praxisnak megfelelő megoldást kínálnak.**

Jellemzői:

- magas színvonalú, felhasználóbarát kivitelezés
- könnyű kezelhetőség
- ergonomikus kezelőfelület
- kiemelkedő minőségű, hosszú élettartamú komponensek
- sokoldalú digitális képalkotó rendszer
- funkciók és konfigurációk széleskörű variációja



Teljesítmény



Biztonság



Tartósság



Ergonómia



► ZooMax White rendszer membrán
kezelőfelülettel, asztallap hosszabbítóval

ZOOMAX GOLD – AZ ÁLTALÁNOS FELADATOK ELLÁTÁSÁRA –

- 32-50 kW teljesítményű generátorok
- Rögzített magasságú csőtartó állvány
- Hosszabbítható, négy irányban mozgatható állatorvosi asztal (152 cm x 71 cm)
- Rögzített fókusz-receptor távolság (SID = 100 cm)
- Könnyen kezelhető membrán konzol (választhatóan LCD kijelző)
- Beépített vagy hordozható digitális panel
- Gyors, egyszerű telepítés




Hordozható monoblokk generátorral is rendelhető klinikai és terepen történő alkalmazáshoz

ZOOMAX WHITE – TOVÁBBI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEKKEL

➕ TOVÁBBI JELLEMZŐK

- Szabadon állítható csőtartó állvány, változtatható fókusz-receptor távolsággal, amely lehetővé teszi az összes vetítési mód alkalmazását
- Az automatikus csatolás szinkronizálja a cső és a receptor horizontális mozgását

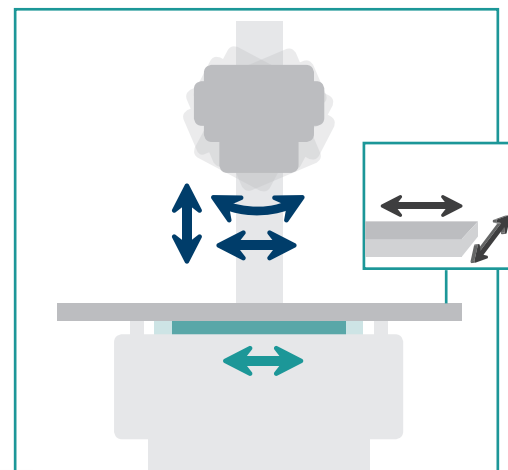


► ZooMax White rendszer



► Asztallap hosszabbító

ZOOMAX RED – A LEGSOKOLDALÚBB RENDSZER + TOVÁBBI JELLEMZŐK

- Mennyezetre rögzített röntgenső vízszintes mozgással, forgatható csőpozicionálással
- Mennyezet magasságához állítható teleszkóp-hossz
- Emelhető asztal, négy irányban mozgatható asztallappal megkönnyíti nagyobb testű páciensek pozicionálását
- Mennyezeti felfüggesztés lehetővé teszi a szabad hozzáférést négy irányból

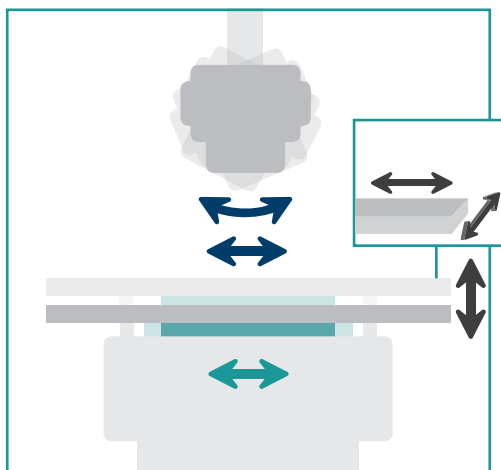


► ZooMax Red rendszer



ZOOMAX LIFT – A KÜLÖNLEGES IGÉNYEK KISZOLGÁLÁSÁRA + TOVÁBBI JELLEMZŐK


- Padlóra rögzített röntgensőtartó állvány meghosszabbított vízszintes mozgással, forgatható röntgensővel
- Emelhető asztal, négy irányban mozgatható asztallappal
- Dedikált fali detektorállvány álló helyzetben készülő felvételekhez

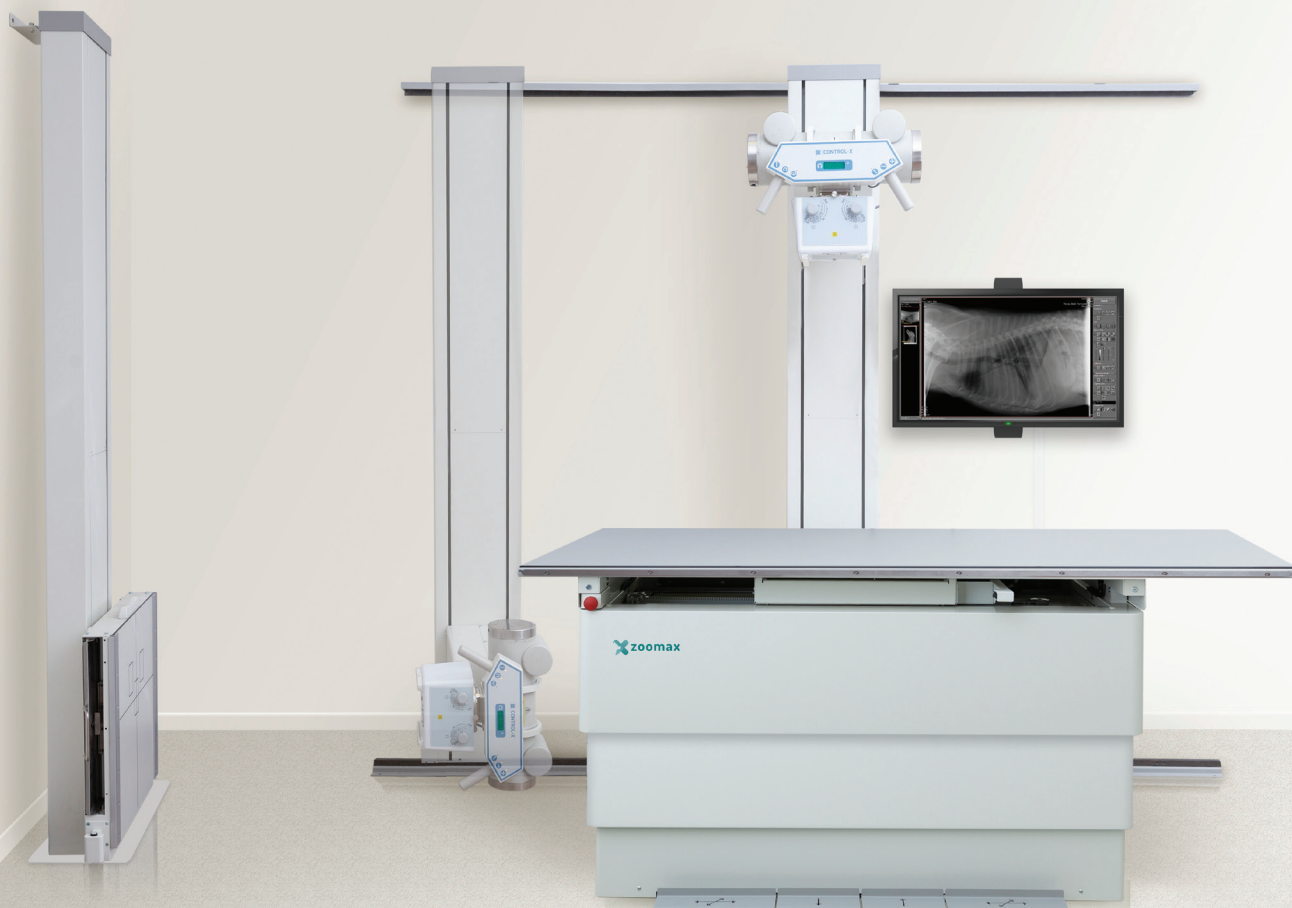



ZOOMAX ROLL - A LEGHELYTAKARÉKOSABB RENDSZER

- Rögzített röntgenső
- Csőtartó állványra szerelt detektortartó
- Többfunkciós, más feladatokra is használható gördíthető asztal
- Minimális helyigény
- Nagy teljesítményű nagyfrekvenciás generátor vagy monoblokk rendszer

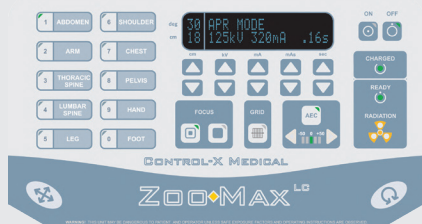

MEMBRÁN KONZOL

- Az expozíciós paraméterek teljes körű digitális beállítása (kV, mA, mAs, sec)
- További többletfunkciók (Bucky vezérlés, AEC)
- 100 lehetséges APR (programozható testrész-automatika) beállítás 10 különböző anatómiai régióhoz/fajhoz



LCD ÉRINTŐKÉPERNYŐ + TOVÁBBI JELLEMZŐK

- Gyors generátor paraméter kiválasztás
- Számos faj-specifikus szervlista
- Optimalizált munkafolyamat kedvec APR beállítással és korábbi expozíciók listájával

ÖT SZTENDERD KONFIGURÁCIÓ

		Csőmozgatás	Csőfordítás	Asztalmazgatás	Monoblokk opció
Konfigurációk	ZooMax Lift	↕↔	↔	6 irányban	—
	ZooMax Red	↔	↔	6 irányban	—
	ZooMax White	↕↔	↔	4 irányban	—
	ZooMax Gold	—	—	4 irányban	✓
	ZooMax Roll	—	—	guruló asztal	✓




INTEGRÁLT GENERÁTORVEZÉRLÉS ÉS KÉPALKOTÁS

Egyetlen, központi kezelőfelület az optimális munkafolyamathoz:

- Korlátlan számú APR program
- Teljes DICOM kompatibilitás

Kifinomult képfeldolgozási jellemzők:

- Rácselnyomás vagy rács nélküli képalkotás
- Detektor állapot indikátorok
- Wifi jelerősség indikátor
- Digitális röntgendetektorok széles választéka
- Hordozható megoldások tablet, laptop munkaállomással
- MiniPACS
- Felhőalapú tárolási lehetőség
- Mobil megtekintés bármilyen eszközön

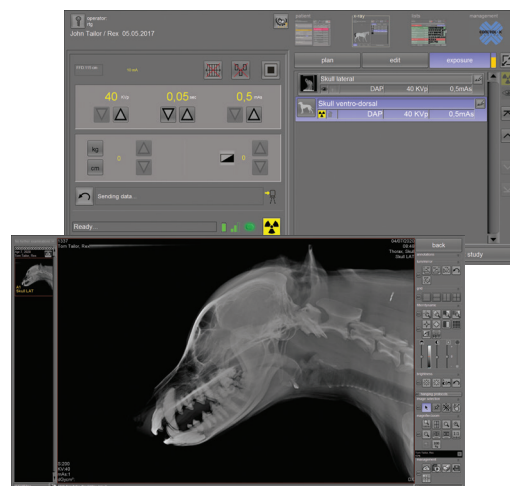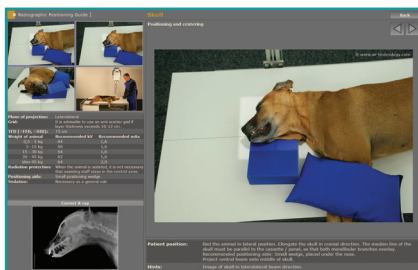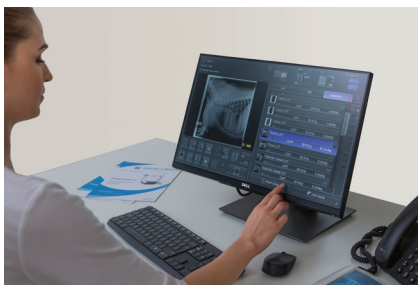

Páciens pozicionálási útmutató

KIEMELKEDŐ MINŐSÉGŰ KOMPONENSEK


- Csúcskategóriás röntgensövek
- Nagy sűrűségű kivehető rácsok
- Tanúsított manuális sugárrekesz fénysugárral vagy lézerrel, az egyszerű pozicionáláshoz
- Nagy teljesítményű generátorok a minimális expozíciós idő érdekében

GENERÁTOROK

- 32 kW-tól 50 kW-ig terjedő skála
- Energiatárolós, kondenzátortelepes generátorok 50 kW-ig 15 amperes konnektoros táplálással
- Monoblokk generátorok 3,2 kW-tól 5 kW-ig

MŰSZAKI TÁMOGATÁS TÁVOLI ELÉRÉSEL

A telepített szervizprogram lehetővé teszi a hiba-elhárításra fordított idő minimalizálását.

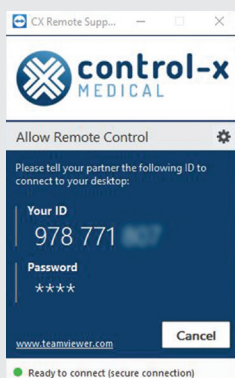

TANÚSÍTVÁNYOK

A Control-X Medical állatgyógyászati diagnosztikai termékei CE jelöléssel vannak ellátva.



GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ:

Control-X Medical Kft.

1141 Budapest, Öv utca 29. | +36 1 381 0301 | cxmed.com



Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a sales@cxmed.hu e-mail címen.

Az Ön telepítő és szervizpartnere: