



zoomax
by  **control-x**
MEDICAL

30 YEARS

cxmed.com

SISTEMAS VETERINARIOS DE RAYOS X

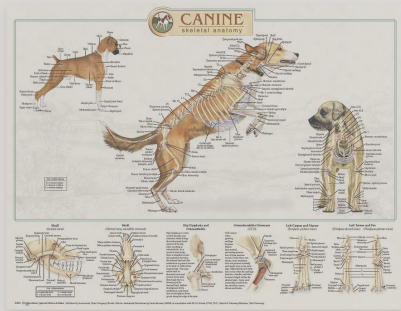

► Sistema digital ZooMax White con pantalla LCD de 10".

UNA SUITE DIAGNÓSTICO VETERINARIO QUE SATISFACE TODAS SUS NECESIDADES

Familia ZooMax de diagnósticos veterinarios ofrece soluciones para todo tipo de consultas:

- Avanzado y fácil de usar
- Fácil de manejar
- Todos los controles convenientemente ubicados
- Componentes de alta calidad y larga duración
- Robustos sistemas de imagen digital
- Variedad de características y configuraciones



Rendimiento



Seguridad



Durabilidad



Simplicidad



► Sistema ZooMax White con consola de membrana y extensión del tablero

ZOOMAX GOLD - EL SISTEMA ESTÁNDAR

- Potencia máxima 32-50 kW
- Soporte de tubo fijo
- Mesa veterinaria flotante extensible en 4 direcciones (152 cm x 71 cm / 60" x 28")
- Distancia fuente-imagen (SID) fija de 100 cm (40")
- Consola de membrana fácil de usar (pantalla LCD opcional)
- Panel digital fijo o extraíble
- Instalación rápida y sencilla




También disponible con generador monobloque extraíble para aplicaciones clínicas y de campo

ZOOMAX WHITE - EL SISTEMA "ALL STAR"

+ CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- El soporte de tubo totalmente ajustable con SID variable admite todo tipo de exámenes
- El **acoplamiento automático** sincroniza el movimiento horizontal del tubo y el receptor

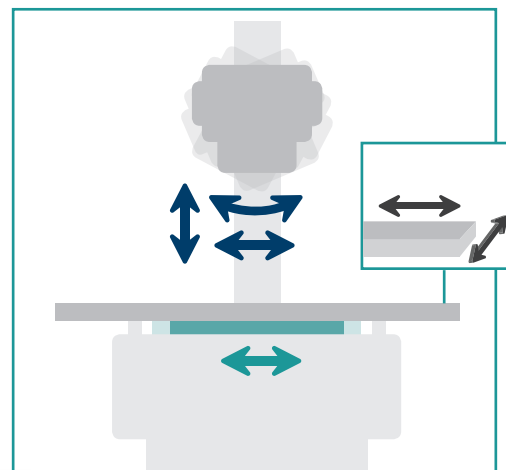


► Sistema ZooMax White



► Tablero extensible

ZOOMAX RED - EL SISTEMA MÁS VERSÁTIL + CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Soporte de tubo de rayos X montado en el techo con recorrido horizontal, posicionamiento angulado del tubo
- Longitud telescópica ajustable para diferentes alturas de techo
- Mesa flotante elevable en 4 direcciones
- La completa libertad de posicionamiento y acceso

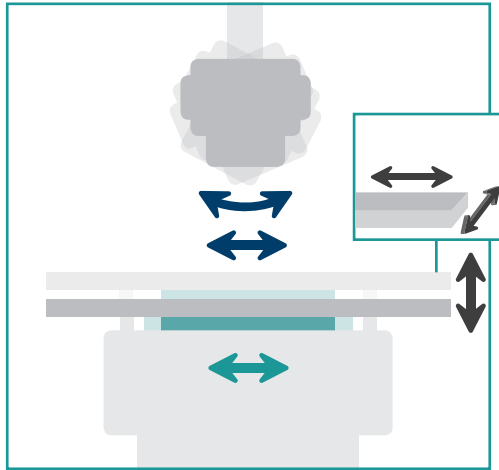


► Sistema ZooMax



ZOOMAX LIFT - EL TOPE DE NUESTRA LÍNEA + DE PRODUCTOS


- Soporte de tubo de rayos X montado en el suelo con recorrido horizontal ampliado, posicionamiento angulado del tubo
- Mesa elevable flotante en 4 direcciones
- Soporte de pared dedicado para estudios de pie/en posición vertical

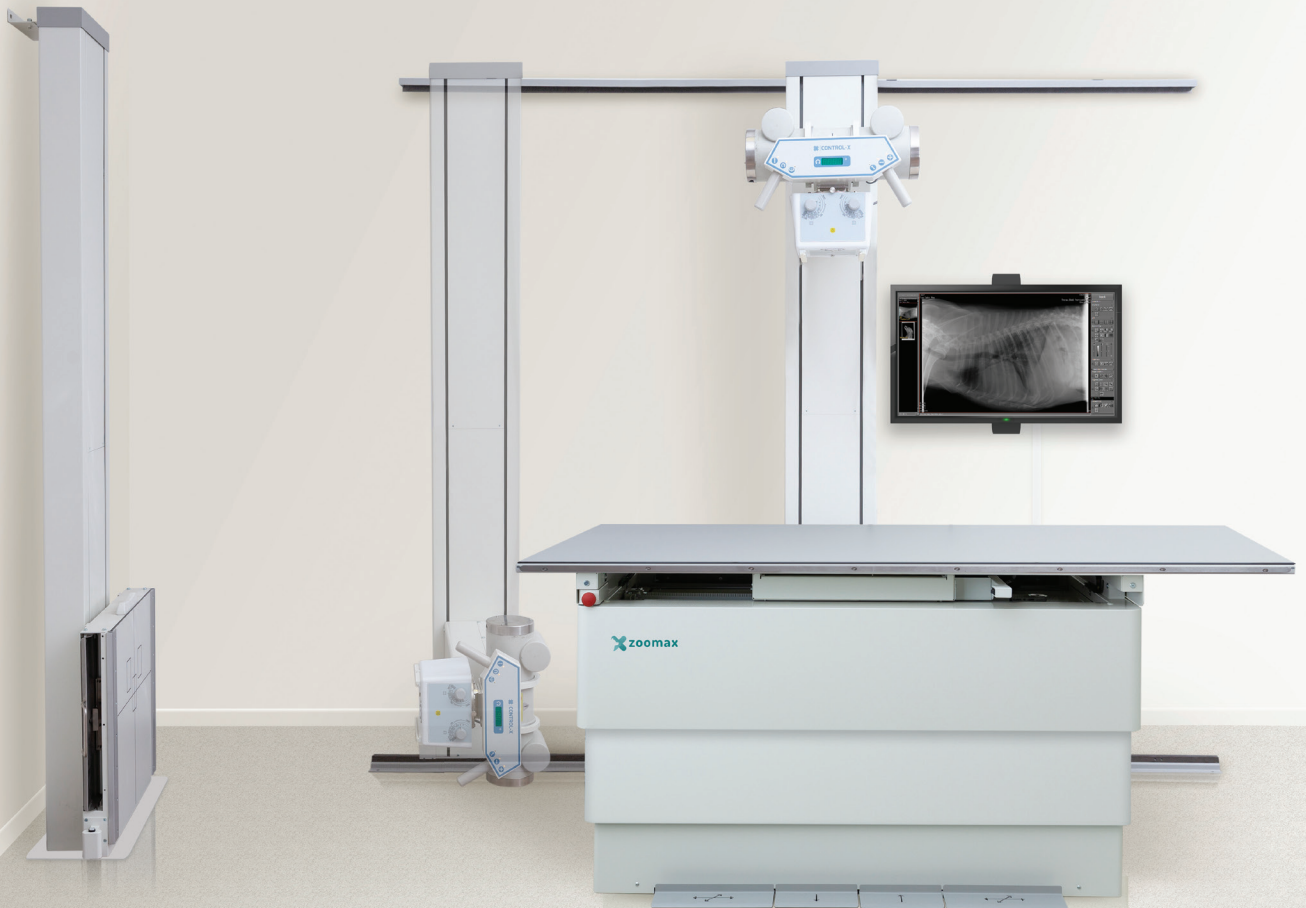



ZOOMAX ROLL - LA CONFIGURACIÓN MÁS COMPACTA

- Tubo de rayos X fijo
- Compartimento receptor montado en el soporte del tubo
- Mesa multiusos rodante
- Requiere muy poco espacio
- Potente generador de alta frecuencia o sistema monobloque

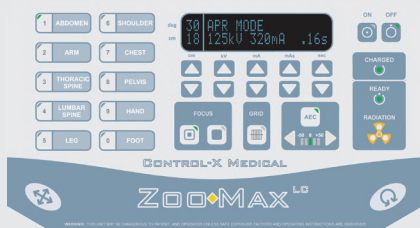

CONSOLA DE MEMBRANA

- Control digital total de los parámetros de exposición (kV, mA, mAs, seg)
- Controles avanzados (Bucky, AEC)
- 100 configuraciones posibles de APR para 10 regiones/especies anatómicas diferentes



PANTALLA TÁCTIL LCD + CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Selección rápida de los parámetros del generador
- Múltiples árboles de órganos específicos de la especie
- Flujo de trabajo optimizado con APRs favoritos e historial de exposiciones

CINCO CONFIGURACIONES ESTÁNDAR

	Movimiento del tubo	Inclinación del tubo	Movimiento de la mesa	Opción de monobloque	
Configuraciones	ZooMax Lift	↕↔	Mesa de 6 vías	—	
	ZooMax Red	↔	Mesa de 6 vías	—	
	ZooMax White	↕↔	Mesa de 4 vías	—	
	ZooMax Gold	—	—	Mesa de 4 vías	✓
	ZooMax Roll	—	—	Mesa rodante	✓




CONTROL INTEGRADO DEL GENERADOR Y ADQUISICIÓN DE IMÁGENES

Single conFlujo de trabajo sin fisuras en una sola consola:

- Ilimitados APRs
- Compatibilidad total con DICOM

Sofisticadas funciones de procesamiento de imágenes:

- Supresión de la rejilla o imágenes sin rejilla
- Indicadores de estado de los detectores
- Indicador de intensidad de la señal Wifi
- Amplia variedad de opciones de detectores de RD
- Soluciones portátiles con tableta, estación de trabajo con portátil
- Mini PACS incluido
- Almacenamiento en la nube disponible
- Visualización móvil en cualquier dispositivo

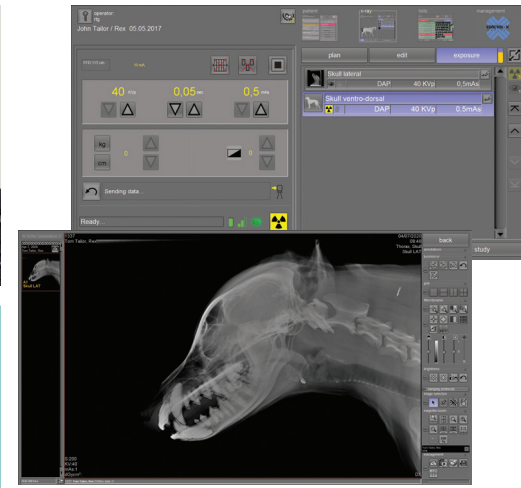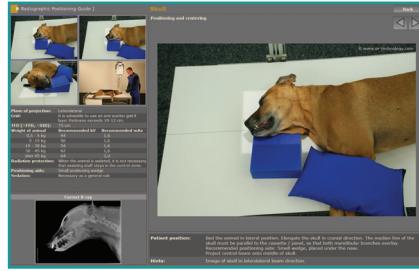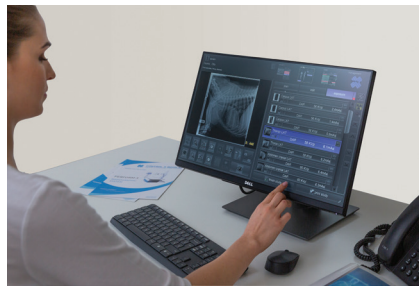

Guía de posicionamiento del paciente

COMPONENTES DE ALTA CALIDAD


- Tubos de rayos X líderes en el sector
- Rejillas extraíbles de alta densidad
- Colimadores manuales certificados con haz de luz o láser para facilitar el posicionamiento
- Potentes generadores para tiempos de exposición mínimos

OPCIONES DEL GENERADOR

- Gama de potencia de 32 kW a 50 kW
- Generadores de energía almacenada de hasta 50 kW (descarga de condensadores) a 15 amperios
- Generadores monobloque de 2,8 kW a 5 kW

SOPORTE REMOTO

El software de servicio permite la resolución de problemas para minimizar el tiempo de

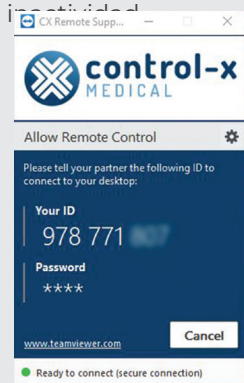

CERTIFICACIONES

Los productos de diagnóstico veterinario de Control-X Medical tienen la marca CE.



Póngase en contacto con nosotros en sales@cxmed.hu o sales@cxmed.com

Distribuidor autorizado:

